

K3[™] Unit Chair

Amazingly Attractive!

奧齒泰誠心推薦 Unit Chair K3

Smart Technology給您最佳的牙醫環境進而提高診療精準度。
使用者動線優化與流暢的操作介面，充滿感情的極簡設計提供醫師、
患者、牙科助理完美的使用體驗。



Attractive Design to All!

頂尖的技术與迷人设计的完美结合
療癒的 Unit Chair K3 ！



Simplicity & sophisticated

化繁為簡的時尚設計能融入牙科診間裝潢，創造出令人安心的診療環境。

Detail in detail

Smart 模組提高診療的精準度，人體工學設計提高患者的便利性，而輔助桌與精密的操作按鍵等設計，讓牙科助理能即時的提供支援。

Usage & attitude

高標準的基本配備與合理價格外，彈性的色彩及選項，可配合您的喜好與風格，量身訂做專屬的 Unit Chair。

Beyond expectation

完美的服務造就完美的品質。OSSTEM的即時售後服務與差異化的Active service 可提高診療的精準度，讓患者覺得安心。





Detail in detail for Dentists

從流暢的診療過程延伸出完美的治療結果。
K3的smart & clean technology 運用直覺化設計，為您省略多餘的操作流程。
OSSTEM，持續致力於提供您最好的診療環境。



For smart & Accurate treatment Dr.Table & Others

K3的 Dr. table採用4.3吋 Full color LCD面板，讓您一眼掌握所有資訊。
寬廣的桌面、滑鼠操作區及專屬病歷架更加提高了診療的精準度與效率，
Handpiece注水、燈光操作按鍵、RPM(轉速)設定與計時器等，讓您可以穩定又精準的完成治療。
K3 Chair可大幅度變化升降高度，靈活配合您慣用的診療姿勢，提供最佳化診療環境。



Quick fact!

X光片檢視功能

操作面板功能中，按 **F** 按鍵LCD面板全面會變成白色背光，方便您觀看 Intra-oral X光片。

診療標示 (Animation)

透過LCD螢幕以多種動態顯示畫面提供診療資訊，一眼就可掌握Chair啟動狀態與設備啟動等的資訊。



Cart Type



高智能 Doctor table

器械放置孔搭配特殊角度設計，並配有LED狀態顯示燈，讓器械收納更準確。



Scaler強度調整功能

Scaling 強度調整旋鈕配置於Doctor table，Scaling 時可很輕易的調整強度。




患者資料架 / 滑鼠操作區 / 延伸桌面

患者資料架也可放置平板電腦，寬廣的滑鼠操作區，延伸桌面可放置多樣的設備。

最佳診療姿勢

K3 Chair可大幅調整高低，最低365mm至最高795mm，可動式懸臂器械台提供彈性空間運用，給醫師、患者與助理最佳姿勢。

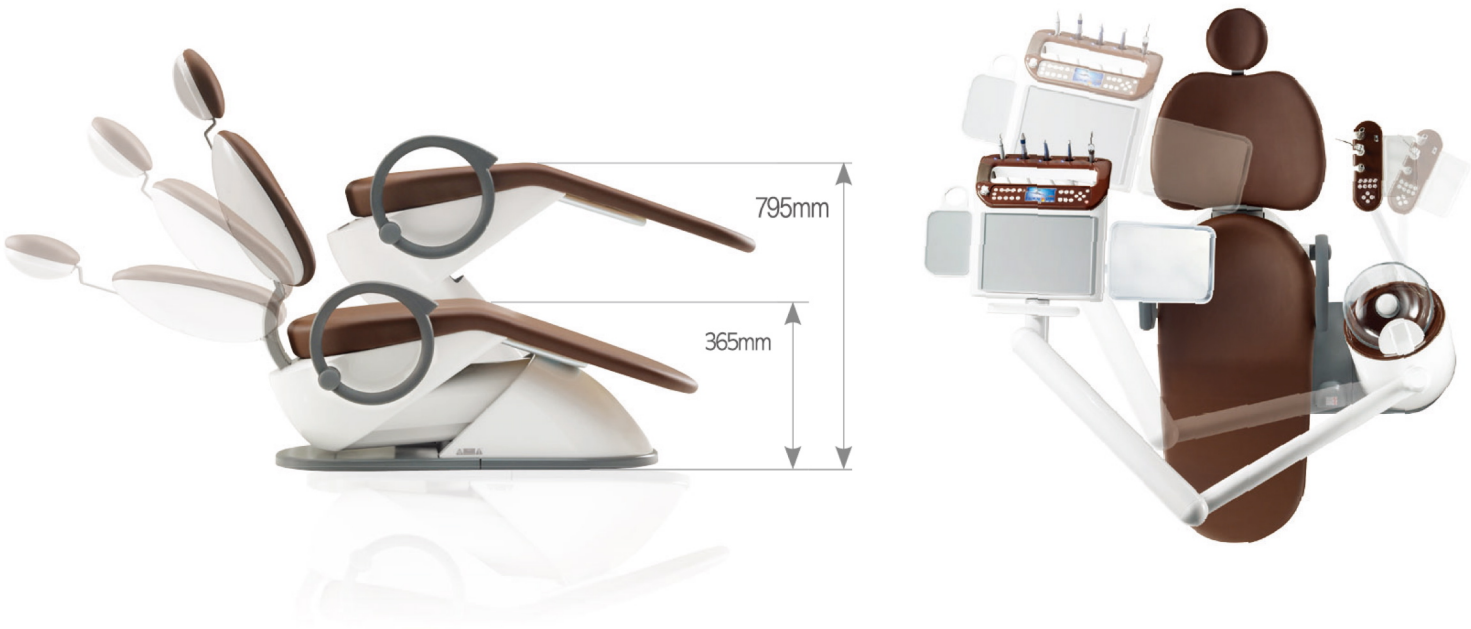

Detail in detail for Assistants

精密的操作按鍵與高便利性的配備，可簡化助理的業務，提高效率。
完美提供醫師與患者最佳協助。



Effective for the treatment Assistant Table & Unit

K3 Assistant table為高效率配備設計，提供治療時所需的各種消耗品與器械。可迴轉輔助桌採零衝突動線設計，提高診療的便利性。
Unit 採用堅固的地板固定方式以提高安全性，管狀外型設計朝患者方向傾斜，展現出我們急切渴望患者康復的熱誠。
此外寬廣的痰盂台、USB端口、110V插座等，使K3的方便性與功能性極大化。



Quick fact!

Easy to Clean
除了痰盂台與杯墊，出水口也是One touch方式，容易拆卸清洗。

操作面板

K3 輔助桌的操作面板裝載調整位置、痰盂台清洗、燈光On/Off等多種功能。



雙關節桌面旋臂

K3 的桌面旋臂是採用雙關節迴轉方式。提高了助理的空間利用與使用者便利性。



雙重感應出水區 / 玻璃痰盂台

K3出水區與玻璃痰盂台之設計為特別針對各年齡層患者最方便使用的高度與形態而製作，提供患者更多的便利性。另外在出水區應用雙重感應的方式，可供應正確的水量。分離式寬廣透明的玻璃痰盂台，容易清洗維護。



水量調整 / 溫水開關

UNIT設有旋鈕控制水量及溫/冷水切換裝置，提高使用者的便利性。



USB端口 & 110V插座

在 Unit安裝USB端口及110V插座，提高了與其他器具的擴展性。



Suction filter & 輔助置物區

容易清洗的Suction filter方便清潔維護，可拆卸型的輔助置物區，診療時可彈性運用。



Detail in detail for Patients

符合身體曲線的Chair，且方便舒適的Unit。
K3的人體工學設計令患者舒適、安心。

Ergonomical designed Patient Chair

採用最高級油壓馬達的座椅，由於座椅與Unit以分離方式固定，降低Chair升降時的震動。
透過寬廣的背墊與人體工學設計的座墊與頭枕，使患者更舒適。



Arm-rest

採用可上下移動的旋轉型扶手，方便患者的進出。
時尚的圓形扶手設計，讓患者坐或躺時，
可舒適的把手放在上面。



Head-rest & Back-rest

貼心角度設計，提供患者頭部舒適的支撐，
K3獨特的one-touch方式，
可輕易的調整高低且持久耐用。
寬廣的背墊與包覆式設計，
讓患者任何角度都能自在舒適。



地板固定型Unit & 油壓方式設計

內建頂級油壓馬達且Unit採用地板固定式設計，
大幅降低Chair升降時的震動與噪音。



Light & Accessories

貼心的細節規劃與設計造就了完美的K3。
考量使用者的視線與動線所採用的燈光與配備，給您最佳診療品質。


Dental Light

標準配備LED無影燈，可6階段調整亮度，提高醫師的診療成效，減少患者的不適。另外先進的Blue cut-off (過濾藍光) 技術，解決了目前市面上LED燈的樹脂硬化問題。



*K3 Dental LED Light Key Features

Technological Feature	Benefit
Long life, No replacement	擁有30,000小時以上壽命的LED燈泡可維持15年以上 (每年至少可使用2,000小時)，減少更換燈泡的負擔。
No IR	低發熱LED燈無紅外線(Intra-red)，讓您與患者安心舒適。
CCT 5000K	明亮又清晰的5000K色溫LED燈，適合觀察牙齒與軟組織的色彩。
CRI > 90.0	K3高演色性LED燈CRI (Color rendering index) 值達90以上，領先一般LED燈，讓植體或補綴物的比色更精確，提高診療品質。
Blue cut-off	採用Blue cut-off (過濾藍光)技術，解決現有LED燈的樹脂硬化等問題。

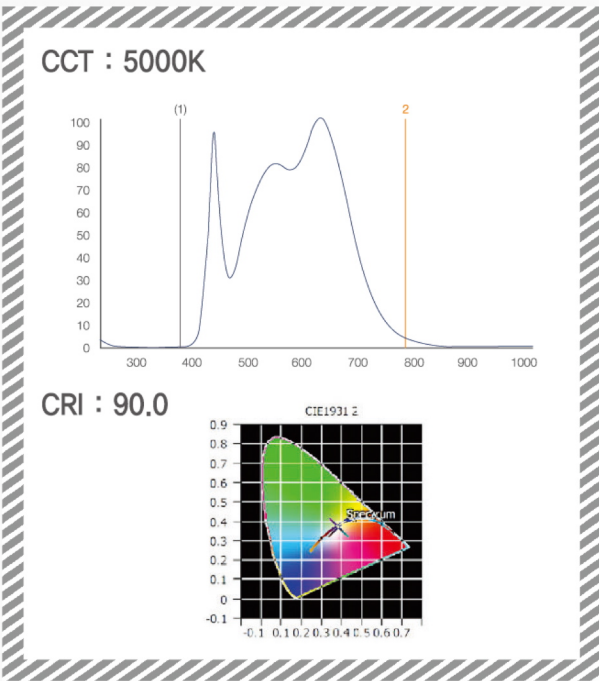

Accessories

簡潔的3 in 1紙杯架、紙巾、輔助桌設計及靈活的3關節螢幕懸臂系統，讓您在任何視線下都能正確掌握治療狀況。



3 in 1紙杯架、紙巾、輔助桌



3關節螢幕懸臂系統

Dr.Stool 醫師椅

符合人體工學所設計的Dr. Stool，減輕您長時間診療的疲勞感。



Foot Controller 腳踏控制板

依使用者觀點所設計的搖桿型腳踏控制板，可調整Chair位置、Handpiece速度、Scaler的啟動等，具絕佳的操作性能。



Color Options

K3提供多樣顏色選擇，可輕易搭配牙科診間內部裝潢。

1. Brown



2. Dark Blue



3. Red



4. Orange



5. Ivory



6. Light Green



7. Light Blue



8. Light Violet



* 選擇Brown及Dark Blue以外之顏色均需提前預定。
* 色彩樣式因印刷關係與實際產品有些許差異，僅供參考。


Specification

K3高水準的標準配備與多樣選擇，給您最佳的診療環境。

	標準配備	數量	詳細規格
Table Type	Mount or Cart type (選擇1)		
Highspeed Handpieces	Osstem H510L Standard Head	1 set	Power : 20W, Speed : 360,000~430,000min ⁻¹ Head Size : ø12.1 X H13.3mm LED optics
	Osstem H310L Miniature Head	1 set	Power : 16W, Speed:380,000~450,000min ⁻¹ Head Size : ø10.6 X H12.4mm LED optics
Lowspeed Motor	Osstem AE Motor	1 ea	Air Motor, External Water Spray Max 25,000min ⁻¹
Lowspeed Contraangle	Osstem A200E	1 ea	Push-button, For CA bur (ø2.35) Max Speed : 40,000min ⁻¹
Lowspeed Straight	Osstem A400E	1 ea	For Hp bur (ø2.35) Max Speed : 40,000min ⁻¹
Ultrasonic Scaler	DIT SONICbuff 300	1 set	
Stool	Dr. Stool	1 ea	
其它器材類	3-Way syringe	2 set	
	Vacuum syringe	1 ea	
	Salivar ejector	1 ea	

* 規格與配備可依實際銷售情況而有所變動。

Dimensions

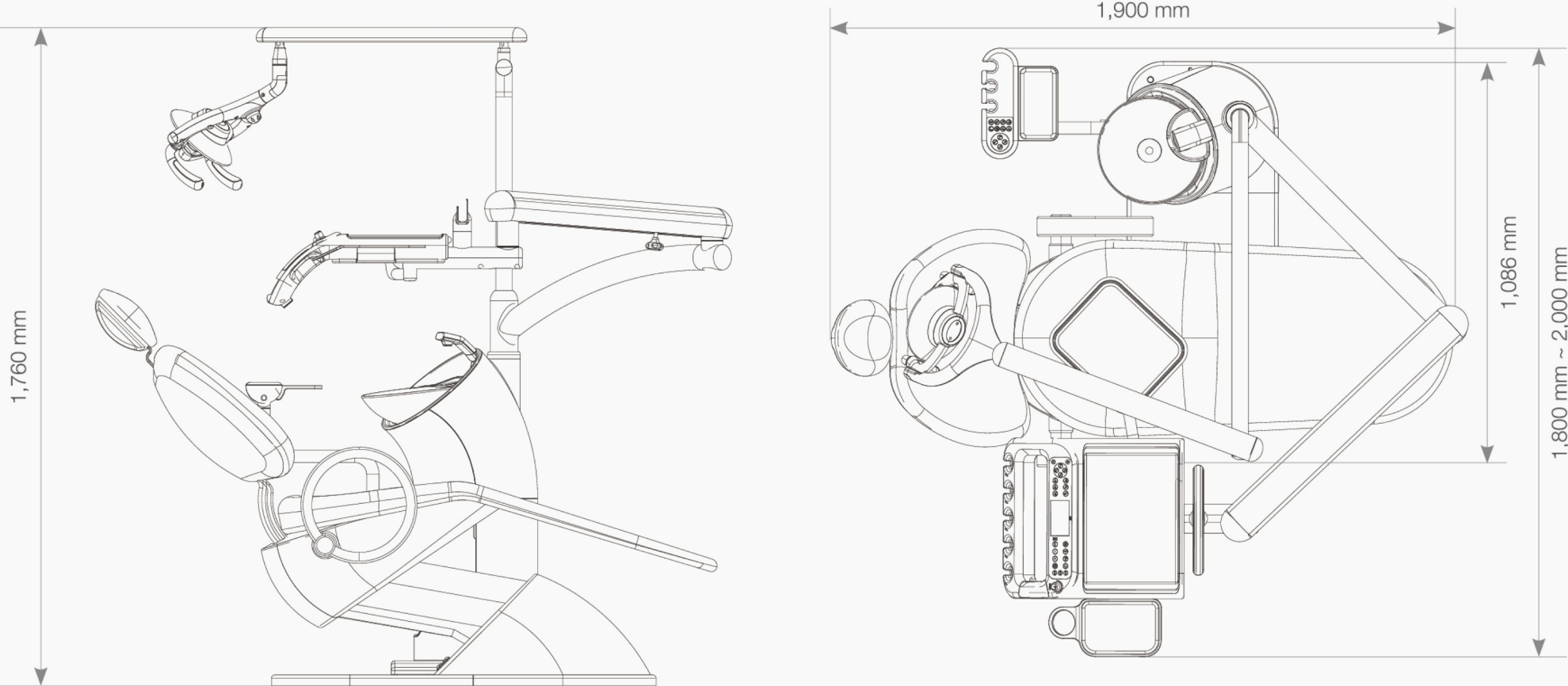

Active Service Beyond Expectation

奧齒泰的Active service完美超乎想像

專業技術人員，遍佈全國據點

即時售後服務之外，透過 'Active service' 產品定期檢查等，提高客戶的滿意度

OSSTEM，您的第三個隱形員工



Active Service

定期檢查與即時服務




Easy to Maintain

好管理易保養



A/S Network

專業技術人員遍佈全國據點

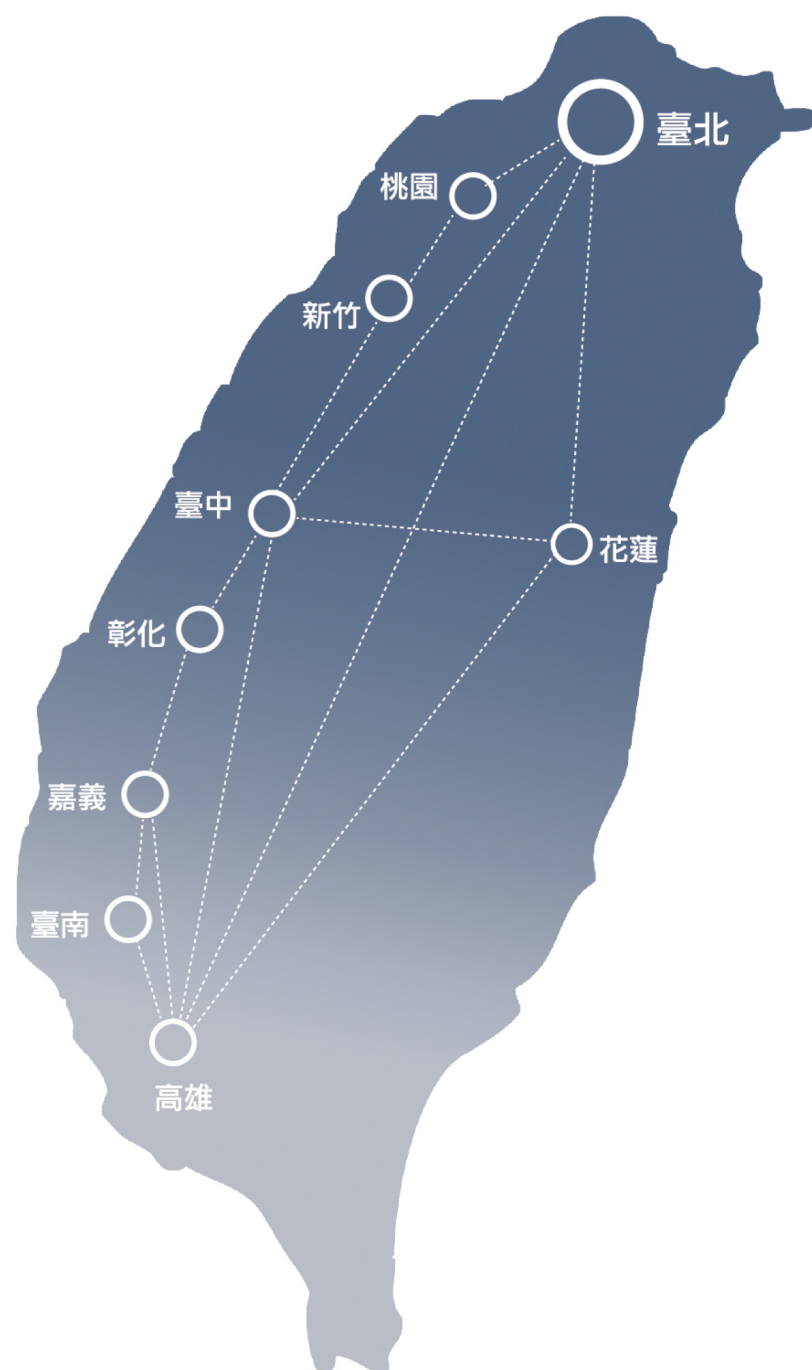

OSSTEM[®]
IMPLANT

奧齒泰有限公司 台北市中山區南京東路三段131號5樓 www.osstem.com.tw

台北(花蓮) TEL (02) 2547-1082 桃園 TEL (03) 215-1555 新竹 TEL (03) 658-2795

中彰 TEL (04) 2265-6215 嘉南高 TEL (07) 550-1359

Edition 06/2015



osstem taiwan



osstem.com.tw